

► www.24msm.de ◀



Die Sitzschale

► **HANNA** ◀

Die Sitzschale ► HANNA ◀

Die Sitzschale HANNA ist eine anspruchsvolle Sitzlösung für Kinder und Jugendliche jeden Alters mit schwerster körperlicher Behinderung. Die zahlreichen Einstelloptionen und die breite Zubehörpalette sorgen für einen außergewöhnlichen Halt und Komfort.



AUFBAU UND HERSTELLUNG

Das Sitzmodul der Sitzschale HANNA wird mittels modernster digitaler CAD-Technik nach Vakuumabdruck aus einem Block gefräst. Dadurch wird eine gleichmäßige Schaumhärte im gesamten Polsterbereich garantiert. Die Polsterung erfolgt nach der im Abdrucksystem festgelegten Form.

HANNA ist als Grundschaale in sieben Standgrößen sowie auf Wunsch nach individueller Fertigung erhältlich. Die anatomisch geformte Sitzschale ermöglicht eine optimale Sitzposition und verhindert Druckstellen. Nachbesserungen nach dem Abdruck, die üblicherweise nach der Fertigung von geschäumten Sitzschalen nötig sind, entfallen ebenso wie ein zusätzlicher Abdruck für eine Zweitversorgung.

Der Corpus besteht aus hochwertigem Aluminium. Eine aktive Rückenform bietet gleichzeitig Halt und freie Beweglichkeit für den Oberkörper. Die optional erhältlichen Rumpfführungspelotten können in Höhe und Breite variabel eingestellt werden und ermöglichen eine optimale Rumpfführung.

Darüber hinaus ermöglicht das System die Verwendung von funktionellem Sitzsystemzubehör, wie z. B. Kopfstützen, Rumpf- und Beckenfixierungen, Armlehnen, Tischen und Fußauflagen. Die Sitzschale HANNA kann auf jedes Untergestell adaptiert werden und bietet Patienten mit schwerster körperlicher Behinderung sicheren Halt.

PRODUKTMERKMALE

Die Sitzschale HANNA besitzt als Maßfertigung:

- ▶ einen speziell für den Einsatzbereich entwickelten Foamschaum
- ▶ die Möglichkeit der individuellen Anpassung
- ▶ eine optimale Druckverteilung für Dekubitus gefährdete Patienten
- ▶ die Montagemöglichkeit auf alle Untergestelle
- ▶ abnehmbare und waschbare Sitzbezüge

EINSATZMÖGLICHKEITEN

- ▶ bei schweren Bewegungsstörungen und Lähmungen
- ▶ bei Fehlbildungen des Rumpfes
- ▶ bei starken Fehlbildungen der Hüfte oder des Knies



Das Zubehör für ► HANNA ◀

ABDUKTIONSKEIL

Der Abduktionskeil ist ein medizinisches Hilfsmittel, welches die Oberschenkel führt bzw. eine Abspreizung der Oberschenkel gewährleistet.




RUMPF- UND BECKENFIXIERUNG

Beckengurte, Schultergurte und Brustschultergurte erhöhen die Sicherheit und gewährleisten die richtige Sitzhaltung. Die Verschlusssysteme lassen sich einfach anlegen und schnell wieder öffnen. Je nach Bedarf sind unsere Gurtsysteme mit Reißverschluss, Druckknopf, Metall oder mit einem seitlichen Verschluss aus Kunststoff erhältlich. Ein luftdurchlässiges Material gewährleistet einen angenehmen Tragekomfort.

KOPFSTÜTZEN


Für Kinder und Jugendliche mit einer schwachen Kopfkontrolle empfiehlt sich ein Sitzsystem mit Kopfstütze. Die Kopfstützen in den Ausführungen Standard mit Seitenführung sowie Muschel- und Flügelform sorgen für eine optimale Kopfhaltung und bieten sowohl in aktiven Phasen als auch in Ruhephasen einen bequemen Halt. Die Kopfstützen haben je nach Ausführung einen Aluminium- oder einen Kunststoffkern.

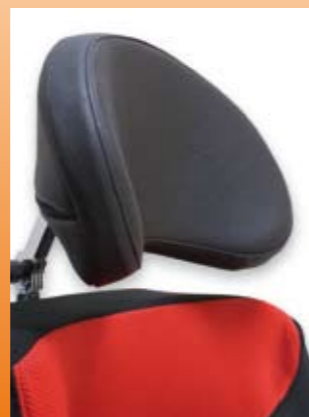

PELOTTEN

Thoraxpelotten dienen zur seitlichen Führung und Stützung des Oberkörpers. Die Pelotten können rechts und links vom Rumpf des Patienten fixiert werden und sind optional schwenkbar oder abnehmbar. Standardisiert werden die Pelotten in die Fräsung integriert.

CORPUS | FARBEN

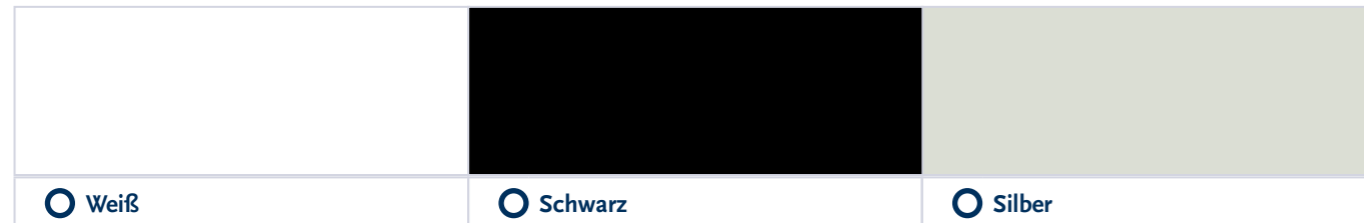

SITZBEZÜGE | STOFFE UND FARBEN

I. Abstandsgewirk (mit klimatisierender Wirkung)



II. Velours (mit flauschiger Oberfläche)



SITZBEZÜGE | STOFFE UND FARBEN

III. Stoff der Klassiker



IV. Datex (robuster und pflegeleichter Stoff)



V. SKY (elegantes Kunstleder)



WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR IHRE ►HANNA◀ BESTELLUNG

Das geeignete Sitzbreitenmaß des Sitzsystems liegt zwischen 20 und 42 cm.
Zur Herstellung des Sitzsystems benötigen wir zusätzlich zum Bestellschein:

- das ausgefüllte Patientenmaßblatt (siehe Bestellkatalog)
- das ausgefüllte Maßblatt Hanna (siehe Bestellkatalog)
- genaue Informationen über das von Ihnen verwendete Untergestell



*M.S.M. | Mitschke Sitzsystem Manufaktur GmbH
Avenwedder Straße 45 • 33335 Gütersloh
Telefon: 05241 40015-0 • Telefax: 05241 40015-270
office@24msm.de • www.24msm.de*