

► www.24msm.de ◀




*Die Standard
Sitz-Rückeneinheit*

► **MONA** ◀

Die Standard Sitz-Rückeneinheit ► MONA ◀

Die Sitz-Rückeneinheit MONA ist eine standardisierte Sitzlösung für Kinder und Jugendliche aller Altersgruppen. Durch eine aktive Sitzform gestattet sie den heranwachsenden Patienten eine freie Beweglichkeit des Oberkörpers und zeichnet sich darüber hinaus durch ihre zahlreichen Erweiterungsmöglichkeiten aus.

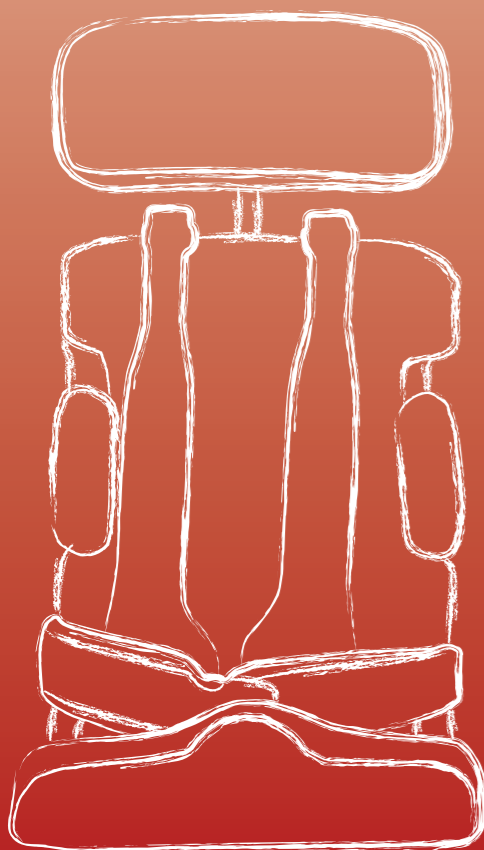

AUFBAU UND HERSTELLUNG

Die Basis der Sitz-Rückeneinheit MONA ist ein stabiler Aluminiumcorpus und eine nach Maß gefertigte Polsterung.

MONA ist für eine einfache Sitzversorgung im Rollstuhl konzipiert und in der Grundversion in drei Größen erhältlich. Das Sitzsystem kann in jedes handelsübliche Rollstuhlmodell eingebaut werden und bietet dem Nutzer einen guten Halt und entsprechende Bewegungsfreiheit.

Die Sitz-Rückeneinheit MONA ist ein modulares System, bei dem jederzeit eine Erweiterung möglich ist. Flexibel wird deren Aufbau durch einzelne, frei kombinierbare Sitz- und Rückenrüstungen wie z. B. abnehmbarer Abduktionskeil, dorsale Sitzabschlusspolsterung, Beckenkammabstützung oder Sitzerrhöhung im Oberschenkelbereich. Die Fertigung erfolgt nach Maßangabe seitens des Fachhändlers.



PRODUKTMERKMALE

Die Sitzschale MONA besitzt als Maßfertigung:

- hochwertige Materialverarbeitung
- geringes Eigengewicht
- Rückenform Aktiv optional nach Maßangabe
- Möglichkeit der individuellen Anpassung vor Ort
- Montagemöglichkeit auf alle Untergestelle
- speziell für den Einsatzbereich entwickelten Foamschaum
- Sitzbezug abnehmbar und waschbar

EINSATZMÖGLICHKEITEN



- bei leichten Bewegungsstörungen und Lähmungen
- bei verminderter Hüftstabilität
- bei Fehlbildungen der Hüfte oder des Knies

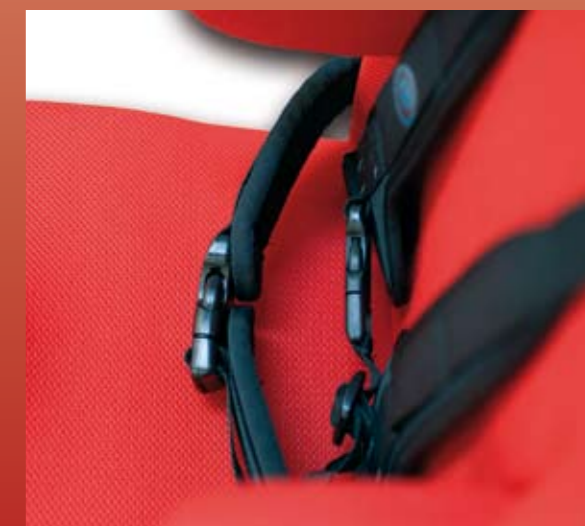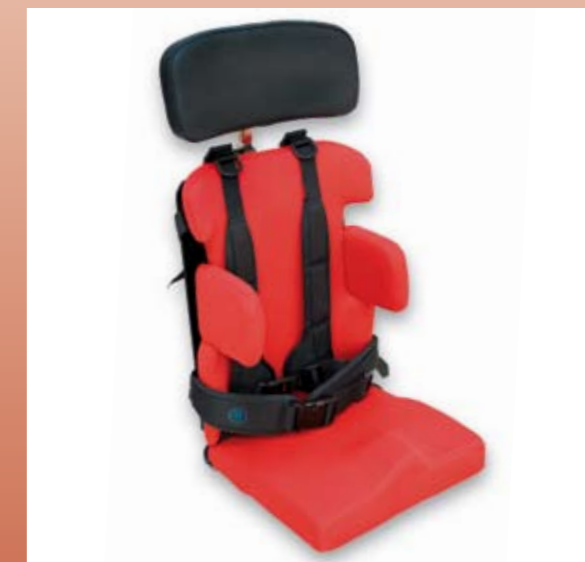

Das Zubehör für ► MONA ◀

ABDUKTIONSKEIL

Der Abduktionskeil ist ein medizinisches Hilfsmittel, welches die Oberschenkel führt bzw. eine Abspreizung der Oberschenkel gewährleistet. Nach den am Patienten genommen Maßen wird der Abduktionskeil im Sitzsystem MONA integriert oder als abnehmbares Zubehörteil geliefert.

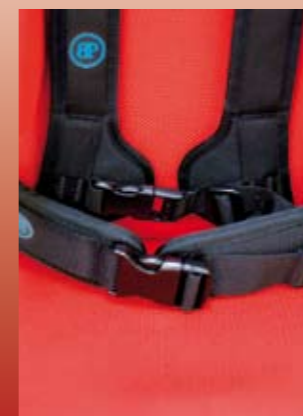
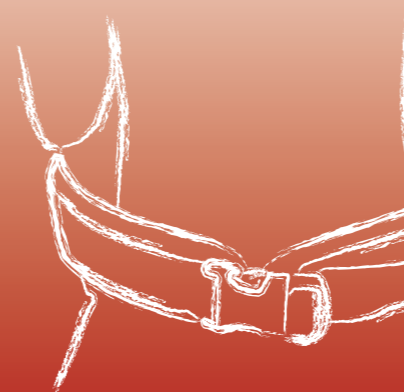


RUMPF- UND BECKENFIXIERUNG

Beckengurte, Schultergurte und Brustschultergurte erhöhen die Sicherheit und gewährleisten die richtige Sitzhaltung. Die Verschlusssysteme lassen sich einfach anlegen und schnell wieder öffnen. Je nach Bedarf sind unsere Gurtsysteme mit Reißverschluss, Druckknopf, Metall oder mit einem seitlichen Verschluss aus Kunststoff erhältlich. Ein luftdurchlässiges Material gewährleistet einen angenehmen Tragekomfort.

KOPFSTÜTZEN


Für Kinder und Jugendliche mit einer schwachen Kopfkontrolle empfiehlt sich ein Sitzsystem mit Kopfstütze. Die Kopfstützen in den Ausführungen Standard mit Seitenführung sowie Muschel- und Flügelform sorgen für eine optimale Kopfhaltung und bieten sowohl im aktiven als auch in Ruhephasen einen bequemen Halt. Die Kopfstützen haben je nach Ausführung einen Aluminium- oder einen Kunststoffkern.

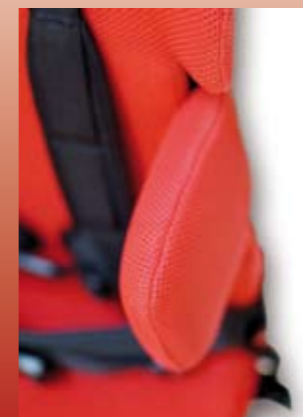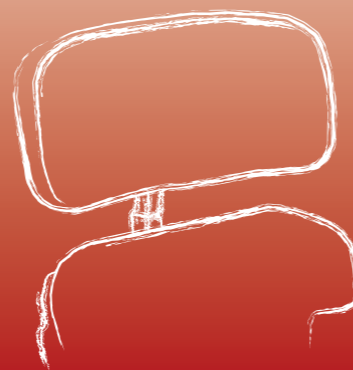

PELOTEN

Thoraxpelotten dienen zur seitlichen Führung und Stützung des Oberkörpers. Die Pelotten können rechts und links vom Rumpf des Patienten fixiert werden und sind optional schwenkbar bzw. verstellbar. Standardisiert werden die Pelotten in die Fräsung integriert.

CORPUS | FARBEN

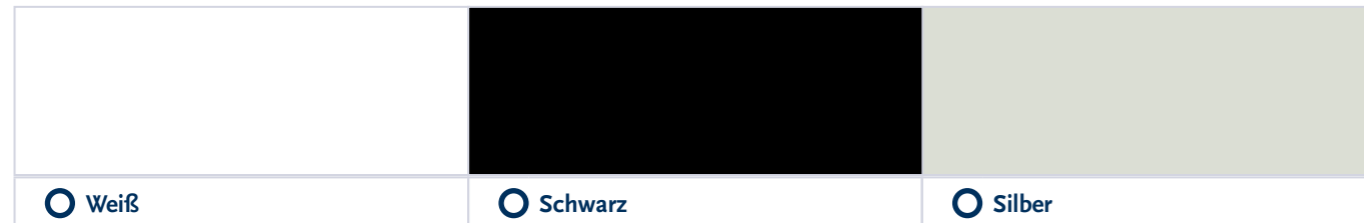

SITZBEZÜGE | STOFFE UND FARBEN

I. Abstandsgewirk (mit klimatisierender Wirkung)



II. Velours (mit flauschiger Oberfläche)



SITZBEZÜGE | STOFFE UND FARBEN

III. Stoff der Klassiker



IV. Datex (robuster und pflegeleichter Stoff)



V. SKY (elegantes Kunstleder)



WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR IHRE ► MONA ◀ BESTELLUNG

Das geeignete Sitzbreitenmaß des Sitzsystems liegt zwischen 26 und 46 cm.
Zur Herstellung des Sitzsystems benötigen wir zusätzlich zum Bestellschein:

- das ausgefüllte Patientenmaßblatt (siehe Bestellkatalog)
- das ausgefüllte Maßblatt Mona (siehe Bestellkatalog)
- genaue Informationen über den von Ihnen verwendeten Rollstuhl



*M.S.M. | Mitschke Sitzsystem Manufaktur GmbH
Avenwedder Straße 45 • 33335 Gütersloh
Telefon: 05241 40015-0 • Telefax: 05241 40015-270
office@24msm.de • www.24msm.de*